

PRIMUS ML 2.0

Leichtgewichtrollstuhl

HMV-Nr. 18.50.02.2116



Abb. mit 200 x 50 (mm) Lenkrädern

Der Leichtgewichtrollstuhl Primus ML 2.0 von **BescoMed**® füllt eine Lücke im bisherigen Rollstuhlprogramm. Die Anforderungen nach noch wirtschaftlicheren Lösungen bei annähernd gleichen Ausstattungsprofilen der Produkte haben uns veranlasst, dort wo es sinnvoll ist, z.B. auch andere Materialien zu verarbeiten, andererseits aber auch im Komfortbereich gerade die Leistungen anzubieten, die der Leistungserbringer als erforderlich vorgibt. Seitenteile, Armlehnen, Beinstützen, Antriebs- und Lenkräder, Bremsen: alle Details in bekannter **BescoMed**® Qualität und bereits bewährt in unserem aktuellen Rollstuhlprogramm. Der Primus ML 2.0 ist ein Rollstuhl, der bereits in seiner Grundausstattung alles bieten kann, was der Rollstuhlfahrer braucht: mit einer Sitzhöhe von 43 -55 (cm) ist er für die meisten Körpergrößen individuell einstellbar. Er ist lieferbar in 7 Sitzbreiten von SB 38 - SB 52(cm). Die Standardsitztiefe beträgt 42 cm, die Rückenlehnenhöhe ist in den meisten Fällen mit 40 cm passend gewählt. Aufgrund der Konstruktion dieses Rollstuhls ist eine Verlängerung des Radstands um 9 cm möglich, und damit ist die Kippsicherheit beispielsweise auch für beinamputierte Menschen gegeben.

Pannensichere 6-fach höhenverstellbare Lenkräder in den Abmessungen 7" x 1 3/4" gehören beim Primus ML 2.0 ebenso zum Standard, wie auch die pannensichere Bereifung der 24" Antriebsräder.

Zurückklappbare und abnehmbare Seitenteile, in der Höhe 2-fach einstellbar mittels der mitgelieferten Distanzbuchsen und durch Umsetzen der Armlehnen als Lang- und Kurzaufgabe nutzbar, gehören bereits zur Basistausstattung dieses Rollstuhls. Auch die stufenlos verlängerbaren, abnehmbaren und schwenkbaren Beinstützen mit winkelverstellbaren Fußplatten mit Fersenbändern sind Standard beim Primus ML 2.0.

Die maximale Belastung des Rollstuhls beträgt 130 kg. Lieferbar ist ein sinnvoll ausgewähltes Zubehörprogramm. Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Fragen Sie uns! Wir helfen.

Stand 01/2013

Irrtümer, Druckfehler sowie Abweichungen aufgrund von Produktionsänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor.



Technische Daten

HMV-Nr. 18.50.02.2116

Abmessungen und Gewichte	
Sitzbreite	38 / 40 / 43 / 45 / 48 / 50 / 52 (cm)
Sitztiefe	42 (cm)
Sitzhöhe	Einstellbar von ca. 42,5 - 53 (cm) (abhängig von Lenkradgröße)
Sitzwinkel	4°
Gesamtbreite	Sitzbreite + 20 cm
Gesamtlänge	99 cm
Gesamthöhe	84 - 96 cm (mit Schiebegriffen)
Rückenlehnenhöhe	40 cm
Rückenwinkel	5°
Leergewicht	15,8 / 16,1 / 16,7 / 17,0 / 17,5 / 18,1 / 18,7 (kg)
Maximale Belastbarkeit	130 kg

Reifen	
Antriebsräder	24" x 1 3/8" PU (pannensicher)
Lenkräder	7" x 1 3/4" PU (pannensicher)

Fahreigenschaften	
Kippstabilität	10°

Ausstattung (alphabetisch)	
Ankipphilfe	
Armlehnen 2fach höhen- und längenverstellbar	
Schiebegriffe schwarz	
Seitenteile zurückklappbar und abnehmbar	
Stopfen für Beinstützenprofile und Gebrauchsanweisung	

Zubehör	
Anti-Kipprollen	Beinstützen winkelverstellbar bis 90°
Lenkräder 4", 5", 6", 8" (x 32 mm), 125 x 40 (mm), 140 x 40 (mm), PU pannensicher	Rückengurt 4-fach verstellbar inklusive Rückenkissen
Sitzkissen	Sicherheitsgurt
Speichenschutz transparent	Stockhalter
Trommelbremse für Begleitperson	Kopfstütze
Schiebegrifferrhöhung	Stumpfaufgabe
Therapietisch	Kniehebelbremsgriffverlängerung
Zubehörset Comfort bestehend aus: Anti-Kipprollen, Sicherheitsgurt, Sitzkissen und Stockhalter	

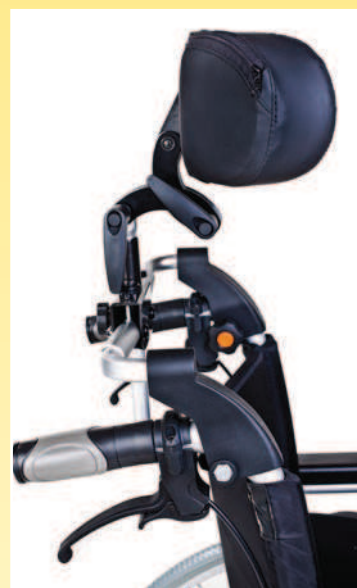


Abb. Optional

Stand 01/2013

Irrtümer, Druckfehler sowie Abweichungen aufgrund von Produktionsänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor.